

Protectores oculares plásticos de calidad superior esterilizables en autoclave



Bilateral (Son reversibles)



Medial	Tamaño	(largo x ancho)	Negro		Amarillo transparente	
			Modelo	Código	Modelo	Código
Bilateral con ventosa	X-pequeño	(23.5 x 21.5 mm)	23-201B	23-201Y		
	Pequeño	(26 x 23.5 mm)	23-202B	23-202Y		
	Mediano	(27.5 x 24.5 mm)	23-204B	23-204Y		
	Grande	(28.5 x 25.5 mm)	23-206B	23-206Y		
Bilateral con sujetador	X-pequeño	(23 x 21 mm)	23-201BH	23-201YH		
	Pequeño	(25.5 x 23 mm)	23-202BH	23-202YH		
	Mediano	(27 x 24 mm)	23-204BH	23-204YH		
	Grande	(28 x 25 mm)	23-206BH	23-206YH		

El modelo bilateral con ventosas de sujeción es ideal para blefaroplastia. El modelo bilateral con manija, puede utilizarse en ambos ojos, facilita la inserción y retiro del protector. La manija podría interferir con algunos procedimientos.

cata laser ES 200530



Haga su pedido por correo electrónico, teléfono, fax o correo postal. Envíos a todo el mundo.

Oculo-Plastik, Inc.

200 rue Sauvé Ouest. Montréal, Québec H3L 1Y9 Canada

+1 514 381-3292 • 1 888 381-3292

+1 514 381-1164 • 1 800 879-1849

sales@oculoplastik.com • www.oculoplastik.com

Impreso en Canadá

LASERSECURE

Protectores e instrumentos de acero inoxidable: Para el uso seguro de láser.

Protectores internos láser Cox®

COX® II y COX® II H



Protectores Durette® externos para láser



Durette® II
con pieza nasal flexible

Durette® III
con piezas nasal y temporales plásticas móviles

Durette® IV
con piezas nasal y temporales metálicas móviles





Protectores oculares Cox® II:




Con tamaño marcado

Para proteger al paciente y al personal de los rayos láser e IPL, Oculo-Plastik ofrece múltiples protectores e instrumentos en acero inoxidable para láser. Sus superficies antirreflejantes dispersan el láser y otras fuentes de energía. Esterilizables en autoclave. Son instrumentos durables y de fácil mantenimiento.

El más solicitado es el nuevo protector ocular láser COX II.

- Diseñado para adaptarse al globo ocular, con una bóveda sobre la cornea. La superficie posterior y los bordes redondeados están altamente pulidos para garantizar la comodidad y seguridad del paciente al ser portados, asimismo durante la inserción y retiro del protector.
- Sin sujetador molesto y pesado, cada protector incluye una ventosa de sujeción para su fácil inserción y retiro. El Cox II con ventosa, es ideal para la blefaroplastia.
- Estos protectores alargados ahora tienen un frente antirreflejante nuevo y mejorado que ofrece al personal mayor protección contra el láser.
- Los Cox II® tienen 1mm de espesor, el doble del espesor de los Cox® originales.

Ahora en cuatro tamaños:
 21-261 X-pequeño, 22 x 19.5mm
 21-262 pequeño, 24 x 21mm
 21-264 mediano, 25.5 x 23mm
 21-266 grande, 27 x 24mm

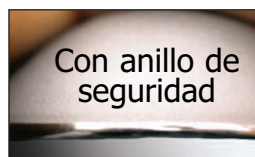

Instrumentos LaserSecure® para blefaroplastia.

Pinzas palpebrales David-Baker



Los retractores David-Baker, de fácil uso, se caracterizan por un sencillo mecanismo de pinzas curvadas para separar suavemente el párpado superior mientras se protegen las delicadas membranas escleróticas.
 21-322 Pinzas palpebrales D-B (pequeño, 24mm)
 21-323 Pinzas palpebrales D-B (grande, 32mm)

Placas palpebral para láser

Placa Khan-Jaeger



21-292 Placa palpebral Khan-Jaeger. Su diseño ergonómico más cóncavo ayuda a evitar presionar el globo ocular; con interior pulido. – ¡Le va a encantar!

Placa Jaeger



21-295 Placa palpebral Jaeger, el formato estándar más plano, con interior pulido.

No debe utilizarse con láser Plástico esterilizable en autoclave

Placas palpebrales Jaeger

Un modelo más cóncavo con un extremo mediano (24mm) y pequeño (22mm). 23-293B.



Un modelo más plano con un extremo mediano (24mm) y grande (26mm). 23-295B.

Plásticos esterilizables en autoclave. Hasta 50 ciclos en autoclave. Todos los protectores son disponibles en negro o amarillo. El protector negro bloquea totalmente la luz y la visión. El amarillo transparente permite observar la pupila. Ideal para casos de anestesia general y claustrofobia. Todos los protectores están disponibles en cuatro tamaños. En los siguientes empaques (Vendido como unidad): Un protector ocular bilateral con una ventosa de sujeción. Un protector ocular bilateral con sujetador.

Utilizar los protectores negros o blancos según la longitud de la onda de su aparato. Los negros cubren un rango más amplio de ondas que los blancos.

Para los protectores BLANCOS:
OD +5 @ 190-590 nm,
OD +4 @ 591-682 nm

Para los protectores NEGROS:
OD +5 @ 190-2575 nm,
OD +4 @ 2576-3000 nm

Para los protectores Durette®
II plásticos negros.
OD +5 @ 190-2575 nm ;
OD +4 @ 2576-3000 nm ;
OD +4 @ 3001-10,600 nm:



- Total exposición de glabella, nariz y sienes.
- Las piezas tanto temporal como nasal pueden alejarse de la zona que recibirá tratamiento, sin afectar la posición correcta de los protectores.
- Anteojos para pacientes en plástico negro o blanco con aditamentos móviles de plástico transparente.
- Los protectores negros vienen con elástico negro y los protectores blancos con elástico blanco.

Protectores externos Durette® plásticos. Original pequeño.
23-442B (NEGRO) y 23-442W (BLANCO), pequeños.

Protectores externos de plástico Durette® II color negro.
23-445B, el nuevo diseño es más grande y con bordes más gruesos para una protección adicional.

Con aditamentos móviles de plástico transparente. Incluye un par ensamblado de protectores oculares plásticos externos. El número total de partes incluye 2 cubreojos, 1 pieza nasal y 2 piezas temporales de plástico, 1 bandas elástica y una bandeja.

Partes plásticas de repuesto. El plástico transparente no es esterilizable en autoclave.

21-440 Aditamentos plásticos de repuesto, 4 nasales. y 4 temporales.

21-440N Aditamentos plásticos de repuesto, 10 nasales.

21-440T Aditamentos plásticos de repuesto, 10 temporales.

21-336 Bandas elásticas negras de repuesto (5)

21-337 Bandas elásticas blancas de repuesto (5)

Ventosas de sujeción




Para facilitar la inserción y el retiro de los protectores oculares. Disponibles por docena. Esterilizables en autoclave. Fabricadas con caucho sin latex. 23-012 (1 docena)

Cox® II - Ejemplos de inserción y retiro

Inserción con los dedos

Inserción con ventosa de sujeción


Retiro con ventosa de sujeción

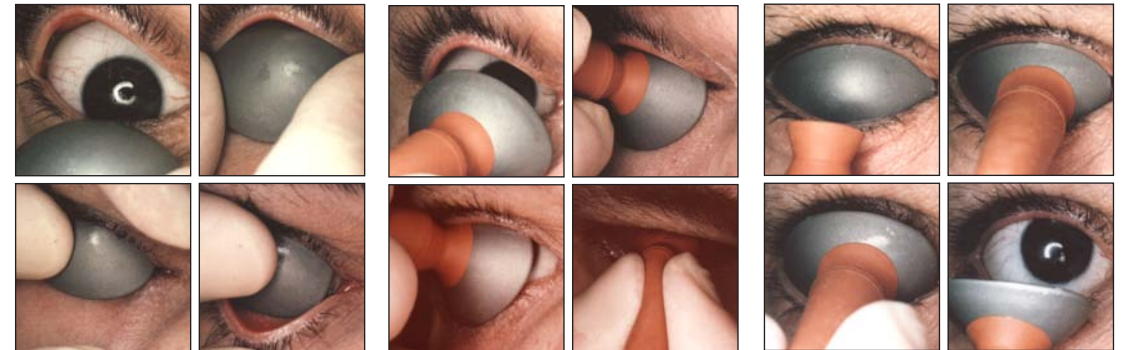

Nota: la mayoría de los conferencistas sugieren el uso de un anestésico tópico y una pomada oftálmica para comodidad y seguridad de los pacientes.

Cox® II H*, con mango descentrado.

- Los nuevos Cox II H, con bóveda sobre la córnea, tienen el tamaño marcado y un anillo de seguridad en el borde.
- La superficie posterior y los bordes están bien redondeados y pulidos; es decir, son de calidad excepcional a fin de evitar lesiones al paciente y favorecer su comodidad.
- El mango descentrado de los Cox II H facilita su inserción y retiro. Su posición cerca del párpado inferior permite cerrar el ojo sin que el párpado superior provoque presión sobre el mango y rotación o desplazamiento del protector, con riesgo de irritación de la cornea o exposición del globo ocular. Cox II H, derecho e izquierdo (e-p, p, m, g)

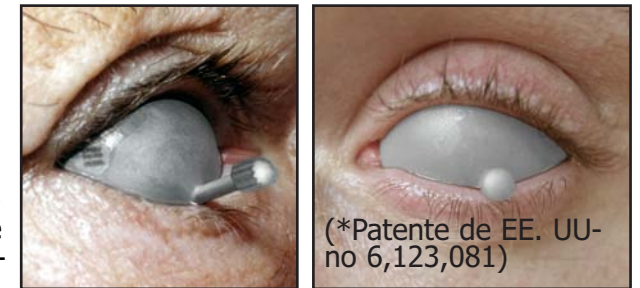


(Protectores derecho e izquierdo)

Ahora en cuatro tamaños, derecho e izquierdo:
21-261H L o R, extra pequeño 22 x 19.5mm
21-262H L o R, pequeño 24 x 21mm
21-264H L o R, mediano 25.5 x 23mm
21-266H L o R, grande 27 x 24mm



Protectores láser externos Durette® metálicos

Para cirugías, rejuvenecimientos faciales, depilaciones, tratamientos no ablativos, sistemas IPL, etc. Las superficies antirreflejantes de acero inoxidable dispersan el rayo láser y otras fuentes de energía.

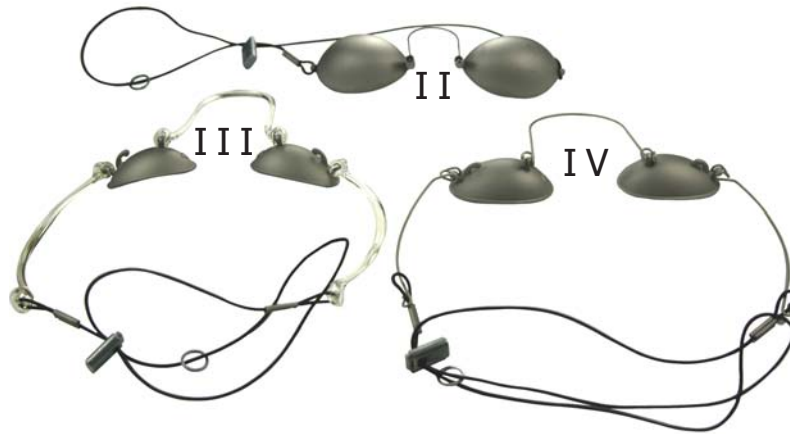

Durette® II externos

- Diseño totalmente en acero inoxidable de 1mm de espesor, sencillo, sólido y práctico.
- Bloqueo total de luz directa. El paciente se sentirá más seguro.
- Banda ajustable ofrece comodidad al paciente.
- Para el tratamiento de sienes el elástico puede moverse hacia arriba o hacia abajo.
- No ejerce presión sobre el globo ocular. El paciente puede abrir los ojos para colocar los protectores externos.
- Superficies fáciles de limpiar. Pueden limpiarse con alcohol.
- Esterilizable en autoclave.
- Bandas elásticas reemplazables.



De fabricación sólida

21-334(pequeños), 21-335(regulares), Protectores láser externos Durette® II, totalmente en acero inoxidable. Incluye, un par de protectores laser externos, 2 bandas elásticas y un estuche negro.
21-336 Bandas elásticas negras de repuesto (5)
21-337 Bandas elásticas blancas de repuesto (5)



Protectores externos* Durette® plásticos y Durette® II plásticos negros

Con piezas nasal y temporales plásticas móviles.

No debe utilizarse con LÁSER, lámparas flash o IPL.

Similar a Durette® III, pero todo de plástico. No autoclavable. Ahora en dos estilos, tamaño original en blanco y negro y el nuevo Durette II negro más grande y espeso.

Diseño con junta de rótula

(*Patentado de EE. UU. (no 7,188,625), también patentado en Canadá y en otros países. Patente internacional en trámite.)

Pueden utilizarse con:

Luz emitida por lámparas fluorescentes, LED luminosos o lámparas dicróicas.
Luz violeta visible en el rango de 405-420.
Fototerapia para las enfermedades cutáneas como la psoriasis y/o el eccema, con el uso de fototerapia UVA o UVB.

Tratamiento PUVA.

Fototerapia CON (NIR) LED rojo y/o próximo a infrarrojo.

Fuentes de luz utilizadas en terapia fotodinámica (PDT).

Diodos emisores de banda estrecha (LEDs) – optimizados con matriz de LEDs.

No se deben utilizar con láseres que emitan un rayo de luz coherente (energía de resplandor de cualquier longitud de onda). O cualquier lámpara flash o sistema IPL que opere en modos de impulsiones con múltiples secuencias. **NO DEBE UTILIZARSE** con resplandor de alta potencia en las ondas UVB y UVA o cualquier otra energía de resplandor o fuente de luz.



Gafas protectoras OP, para láser



Estas monturas están disponibles en una variedad de filtros de longitud de onda para cubrir el rango de los láseres.

Escoja la montura que satisfaga sus necesidades y le ayudaremos a elegir el filtro apropiado a la longitud de la onda de su sistema.

La montura #34 está disponible con una inserción para sus gafas con prescripción. La montura #39 se usa sola o con sus gafas por debajo.

Contáctenos para cualquier requerimiento de protección ocular.

Durette® III* con piezas nasales y temporales plásticas móviles

Exposición total de glabella, nariz y sienas.

- Tanto las piezas nasales como las temporales pueden retirarse de la zona que recibirá tratamiento, sin afectar la posición correcta de los protectores.
- Cubreojos (regulares o pequeños) con aditamentos de plástico transparente.
- Opción de utilizar piezas temporales o gancho para la sujeción directa del elástico.

21-445, regulares o 21-442, pequeños. Protectores láser externos Durette® III, de acero inoxidable, con aditamentos móviles de plástico transparente. Incluye un par de protectores externos ensamblados y aditamentos. El número total de partes incluye 2 cubreojos, 4 piezas nasales y 4 piezas temporales de plástico, 2 bandas elásticas y un estuche negro. Partes plásticas de repuesto. El plástico transparente no es esterilizable en autoclave.

21-440 Aditamentos plásticos de repuesto, 4 nasales y 4 temporales.

21-440N Aditamentos plásticos de repuesto, 10 nasales.

21-440T Aditamentos plásticos de repuesto, 10 temporales.

21-336 Bandas elásticas negras de repuesto (5)

21-337 Bandas elásticas blancas de repuesto (5)



(*Patentado de EE. UU. (no 7,188,625), también patentado en Canadá y en otros países. Patente internacional en trámite.)



Diseño con junta de rótula

Durette® IV* con piezas nasales y temporales metálicas móviles

- Tanto las piezas nasales como las temporales pueden retirarse de la zona que recibirá tratamiento, sin afectar la posición correcta de los protectores.
- Cubreojos (regulares o pequeños) con aditamentos metálicos.
- Opción de utilizar piezas temporales o gancho para la sujeción directa del elástico.

21-555, regulares o 21-552, pequeños. Protectores láser externos Durette® IV, fabricados totalmente de acero inoxidable, con piezas nasales y temporales metálicas móviles. Incluye un par de protectores externos ensamblados y aditamentos. El número total de partes incluye 2 cubreojos, 2 piezas nasales y 2 piezas temporales metálicas, 2 bandas elásticas y un estuche negro.

Partes metálicas de repuesto.

21-550N Aditamentos metálicos de repuesto, 2 piezas nasales.

21-550T Aditamentos metálicos de repuesto, 2 piezas temporales.

21-536 Bandas elásticas negras con sujetador, de repuesto (5)

21-537 Bandas elásticas blancas con sujetador, de repuesto (5)



(*Patentado de EE. UU. (no 7,188,625), también patentado en Canadá y en otros países. Patente internacional en trámite.)

Protector bucal OPSOft *

Ofrece protección durante depilaciones y tratamientos cutáneos con láser, sistemas IPL, IPL/RF, láser RF y RF.

- Elimina el dolor en dientes, encías y mucosa bucal provocado por el láser y otras fuentes de energía.
- Aísla de la corriente eléctrica producida por la radiofrecuencia.
- El polímero de caucho suave se adapta fácilmente a la boca. Incluso en pacientes con facciones pequeñas, no es necesario que los dientes entren en contacto.
- Puede utilizarse encima de dispositivos de ortodoncia, reparaciones e implantes.
- Elimina el dolor y garantiza protección a la vez que dispersa o aísla la energía y evita la penetración.



- Haga una prueba antes de usar el protector bucal OPSOft con cualquier nuevo dispositivo de energía.
- Resultados documentados han demostrado que es seguro e indoloro.

Desechable. Paquete de 10. #60-104

(*Patente EE. UU. (6,681,771), también patentado en Canadá y en otros países.)



ShieldsALL® *

OPShieldsALL™ **

Nuevo protector ocular adhesivo desechable con un diseño único de forma concava está hecho en foil de aluminio grueso y recubierto con polietileno transparente. Actualmente patentado en el Reino Unido. Currently patented in the USA and UK. En este momento se encuentra en etapa de desarrollo y estará disponible muy pronto.

Nuestros nuevos protectores serán fáciles de instalar, permitirán el acceso al puente de la nariz, las cejas y las sienes, además de ser libres de látex e hipoalergénicos. Todos son fabricados 100% en aluminio para una protección total y están recubiertos con polietileno para crear aislamiento del laser. Diseñado con forma concava para despejar el párpado y las pestañas largas de los pacientes. El aluminio semirrígido no puede seguir las características oseas de cada cliente. Por lo tanto, los protectores deben adherirse bien a la piel limpia, lo que explica la necesidad de un superadhesivo. Con asa pequeña para facilitar la extracción. El sujetador se puede doblar y colocar del lado nasal o temporal. Ahora se están realizando las pruebas de seguridad de estos escudos con varios tipos de energía y documentando para asuntos regulatorios como un dispositivo médico de clase 1, primero para Canadá y EE. UU, luego para la UE.

(Patente Estados Unidos # 10632016B2, Patente del Reino Unido # 2555761B), patente pendiente en Canadá y otros países.



(* ShieldsALL® es una marca comercial de Oculo-Plastik, Inc. en EE. UU. Y la UE).

(** OPShieldsALL™ es una marca comercial de Oculo-Plastik, Inc. en Canadá).



Protectores e instrumentos retractores Sutcliffe

Con superficie antirreflejante para protección LASER

Instrumentos de acero inoxidable para separar tejidos, proteger pestañas, cejas, labios, dientes, lóbulos, tejidos, etc.



Los protectores SUTCLIFFE, con todas sus superficies antirreflejantes para su uso seguro con láser, se ofrecen en muchas configuraciones para diversas aplicaciones. La misma pieza básica está disponible con un diseño modificado para proteger diferentes partes del cuerpo. Puede proteger pestañas, cejas, pecas, labios, encías, dientes, etc., así como cualquier tejido (profundo o superficial) que requiera protección. Util durante rejuvenecimientos faciales, procedimientos de incisión, despigmentación de la piel, etc. En cirugía pueden servir como instrumentos para separar tejidos y como barrera. Descubrirá que tienen muchos usos. Con guantes, el modelo doblado es más fácil de manipular. 21-275 Protector Sutcliffe para láser (plano) 21-276 Protector Sutcliffe para láser (doblado)

Protectores láser perforados

Sutcliffe-Boey protector para lesiones y pecas. Para limitar el tamaño del rayo láser.



Protector todo en uno Sutcliffe-Boey. 21-287

Parche Desechable

por **PROTECT**
LASERSCHUTZ GMBH

NO VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Para láser y LED

25 pares

Artículo. no.: 600LASP25N

Niveles de protección láser de los parches oculares:

180-315 D LB7 + IR LB3 + M LB3Y

> 315-1400 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y

> 1400-11000 DI LB4

Fara IPL

50 pares

Artículo. no .: 600IPLP50



SHUTTER

Gafas para IPL

por **PROTECT**
LASERSCHUTZ GMBH

Oscurecimiento rápido a 150 μ s.

Visión excelente

Alta protección durante el flash IPL.

Interruptor encendido / apagado.

Batería reemplazable.

Patillas ajustables en longitud e inclinación.

Se puede usar sobre sus propias gafas.

Artículo. no .: 600SHUIPL

